


SHAPE.
SEAL.
SUCCEED.



GenENDO und BioRoot™ Flow

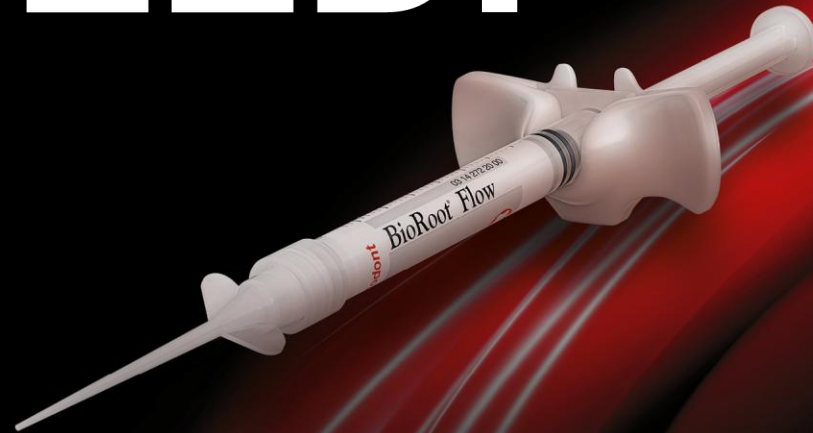

GenENDO | 1 SEQUENZ + 1 GLIDER + 1 REMOVER



REINIGUNG | AUFBEREITUNG | DESINFEKTION | OBTURATION

Mit dem aktualisierten Spüllösungs-Sortiment, BioRoot™ Flow und dem Vertrieb der GenENDO-Feilen lässt sich das gesamte endodontische Verfahren abdecken – von der Reinigung und Formgebung bis hin zur Desinfektion und Versiegelung. So wird die Gesamteffizienz des endodontischen Workflows nachhaltig gesteigert.

SHAPE.
SEAL.
SUCCEED.



GenENDO | PRODUKTÜBERSICHT



**GenENDO
K-Files**

Handfeilen zur
manuellen
Präparation
des Gleitpfades



**GenENDO
Revo-S+**

Rotierende Feilen
zur Öffnung und
effizienten
Kanalaufbereitung



**GenENDO
Glider**

Zur Erleichterung
der Formgebung
bei kalzifizierten
oder gekrümmten
Wurzelkanälen



**GenENDO
Remover**

Rotierende Feile
zur effizienten
und sicheren
Revision



**GenENDO Revo+
Guttapercha**

Perfekte Passform für
das Revo-S+
System, einheitlicher
Taper, latexfrei,
erhältlich in
zwei Größen



**GenENDO
Motor**

Ergonomischer
Endomotor:
starker und
zuverlässiger
brushless Motor,
kabellos

SHAPE.
SEAL.
SUCCEED.

MADE IN EUROPE

GenENDO K-Files – Handfeilen

Für die manuelle Aufbereitung und
Präparation des Wurzelkanals.

3 Feilen mit den Durchmessern 008, 010 und 015, mit 2 % Konizität, 3 Längen (21, 25, 31 mm)

BEHANDLUNGSPLANUNG:

- Größen 008 und 010: für die Exploration und Katheterisierung
- Größe 015: zur Katheterisierung und weiteren Kanalerweiterung sowie zur Schaffung eines Gleitpfades für die Reinigung und Aufbereitung

KLINISCHER NUTZEN:

- Erste taktile Hinweise auf Anatomie, Mineralisierung und Krümmung
- Sorgfältige Erkundung des apikalen Drittels und seiner Durchgängigkeit
- Beurteilung der Schwierigkeit der Behandlung (z. B. gekrümmte Kanäle)
- Unterstützung bei der Auswahl geeigneter Instrumentenfolge (Formgebung)
- Identifikation primärer mechanischer Limitationen
- Bestimmung der Arbeitslänge mit oder ohne elektronischen Apexlokator.
Eine Röntgenaufnahme mit eingesetzter Feile ist zur Bestätigung der Arbeitslänge empfohlen.



SHAPE.
SEAL.
SUCCEED.



GenENDO K-Files – Handfeilen

Farbcodierte Feilen zur einfachen Identifizierung.

Die Spitzendurchmesser sind ISO-farbcodiert.
Diese Farbreihenfolge wurde für die rotierenden Feilen übernommen.

Diese Standardisierung legt den Schwerpunkt auf die Reihenfolge und nicht auf die Größe der rotierenden Feilen, was die Orientierung erleichtert.




HINWEIS:

Der Anschlagring ist nicht ISO-farbcodiert.
GenEndo hat die Farben anhand der Konizität* standardisiert:

- | | | | |
|----------------|--------------|-------------------|--------------|
| ○ Gelber Ring: | 3% Konizität | ○ Schwarzer Ring: | 6% Konizität |
| ○ Grauer Ring: | 4% Konizität | ○ Blauer Ring: | 7% Konizität |

* Rate, mit der der Durchmesser pro Millimeter zunimmt

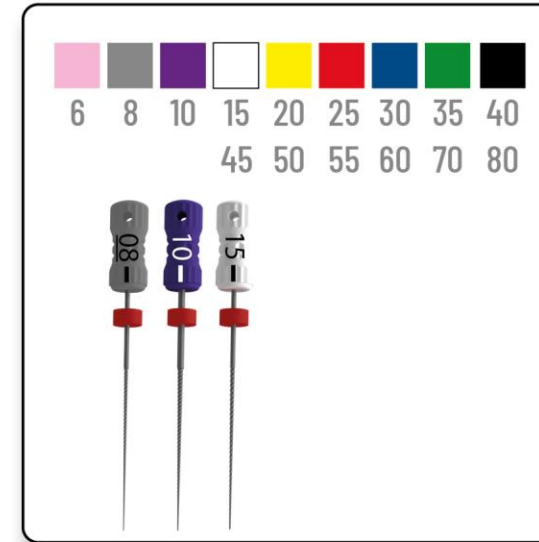

SHAPE.
SEAL.
SUCCEED.



MADE IN EUROPE

GenENDO Revo-S+ – Rotierende Feilen

Zur Öffnung und effizienten Kanalaufbereitung.

- 3 Instrumente mit unterschiedlichen Längen und Konizitäten zur Anpassung an alle Situationen
- Mit dreieckigen symmetrischen und asymmetrischen Querschnitten für optimale Performance

BEHANDLUNGSPLANUNG:

- Erste Erkundung: SC1, öffnet den Zugang für eine koronale Aufweitung (falls gewünscht)
- Zwischenaufbereitung: SC2 vergrößert Kanal-Konizität und bereitet endgültige Formgebung vor
- Finale Formgebung: SU vervollständigt die Aufbereitung und macht den Kanal obturationsbereit

KLINISCHER NUTZEN:

- Effiziente Reinigung und Abformung: dank symmetrischer und asymmetrischer Querschnitte
- Optimierte Debris-Entfernung: hohe Schneidleistung mit versetzter Helix verbessert Debris-Entfernung
- Geringere Arbeitszeit: Effizient- und schnelldesignte Sequenz
- Vielseitigkeit: geeignet für nahezu jede Kanal anatomien, dadurch vielseitig einsetzbar für ein breites Spektrum an klinischen Situationen
- Erhöhte Sicherheit: minimales Frakturrisiko



SHAPE.
SEAL.
SUCCEED.



MADE IN EUROPE

GenENDO Glider – Einzel-Feile

Für die Gleitpfadpräparation zur effektiven Navigation und Bewältigung von Engstellen in kalzifizierten oder dünnen Kanälen.

- Einzelne Feile zur Erstellung eines glatten und reproduzierbaren Gleitpfades
- Progressiver Querschnitt erhöht die strukturelle Stabilität und optimiert Materialabtrag und Schneidleistung

BEHANDLUNGSPLANUNG:

- Erleichtert die Formgebung im Falle von Kalzifikationen oder gekrümmten Wurzelkanälen
- Optionale Feile, einzusetzen, wenn Standardinstrumente an ihre Grenzen stoßen (z. B. nicht nötig, wenn eine K-Feile 15 die Arbeitslänge leicht erreichen kann)

KLINISCHER NUTZEN:

- Schnitteffizienz: Geringere Belastung für nachfolgende Aufbereitungsfeilen
- Zentrierfähigkeit: für eine einfache Führung



SHAPE.
SEAL.
SUCCEED.



MADE IN EUROPE

GenENDO-Remover – Rotierende Feile

**Zur effizienten und sicheren Entfernung
der Guttapercha Revisionsbehandlungen.**

- Hohe Konizität (7 %) und Durchmesser (30) für das 1-Schritt-Verfahren
- 2 Längen

BEHANDLUNGSPLANUNG:

- Erleichtert die Entfernung der Guttapercha nach der Zugangseröffnung

KLINISCHER NUTZEN:

- Revision ohne Lösungsmittel in nur einem Arbeitsgang
- Gutes Eindringen in die Guttaperchaspitze
- Bewahrt die Anatomie des Wurzelkanals
- Nicht schneidende Spitze zur Vermeidung von Perforationen oder Stufenbildung
- Schnelle Rotation zur Plastifizierung der Guttapercha



SHAPE.
SEAL.
SUCCEED.



GenENDO Motor

Ergonomischer bürstenloser Endomotor.

- Endodontiemotor für eine effiziente und präzise Wurzelkanalbehandlung
- Kompatibel mit einer breiten Palette von rotierenden und reziproken NiTi-Feilen
- Vorprogrammierte Einstellungen für GenENDO-Feilen und Möglichkeit, die Einstellungen zu ändern, um den Motor mit anderen Feilen zu verwenden

KLINISCHER NUTZEN:

- Ergonomisch und praktisch: leichtes Handstück, Mikro-Kopf, kabellos, bürstenlos
- Einfache und intuitive Benutzeroberfläche



SHAPE.
SEAL.
SUCCEED.



BioRoot™ Flow | ERLEICHTERT DIE OBTURATION



BIOAKTIVER MINERALISCHER WURZELKANAL-SEALER

- Gebrauchsfertige Spritze
- Direkte Applikation in den Kanal
- Applizieren ohne Kraftaufwand
- Hochgradig röntgenopak
- Kein Schrumpfen
- Begrenzt das bakterielle Wachstum

SHAPE.
SEAL.
SUCCEED.



Befristetes Launch-Angebot für Zahnarztpraxen

Beim Kauf von GenENDO Feilen erhalten Sie eine Packung BioRoot Flow GRATIS dazu!



+



Gratis
Zugabe!

1 x Revo S+ SC1 (5er)
1 x Revo S+ SC2 (5er)
1 x Revo S+ SU (5er)
1 x Glider (5er)

Kundenangebot mit Mehrwert – Ihre Rolle als zentraler Vertriebspartner bleibt bestehen:

BioRoot™ Flow wird initial über das Angebot beworben, der Nachkauf erfolgt exklusiv über Sie.

SHAPE.
SEAL.
SUCCEED.



DÜRFEN WIR IHNEN EINEN
BESTELLVORSCHLAG
ZUR **ERSTVORBERATUNG**
UNTERBREITEN?



GenENDO und BioRoot™ Flow

